


cecotec


SURFACE PRECISION 9700 SMARTH HEALTHY

SURFACE PRECISION 9750 SMARTH HEALTHY

Koupelnová váha s bioimpedancí a aplikací

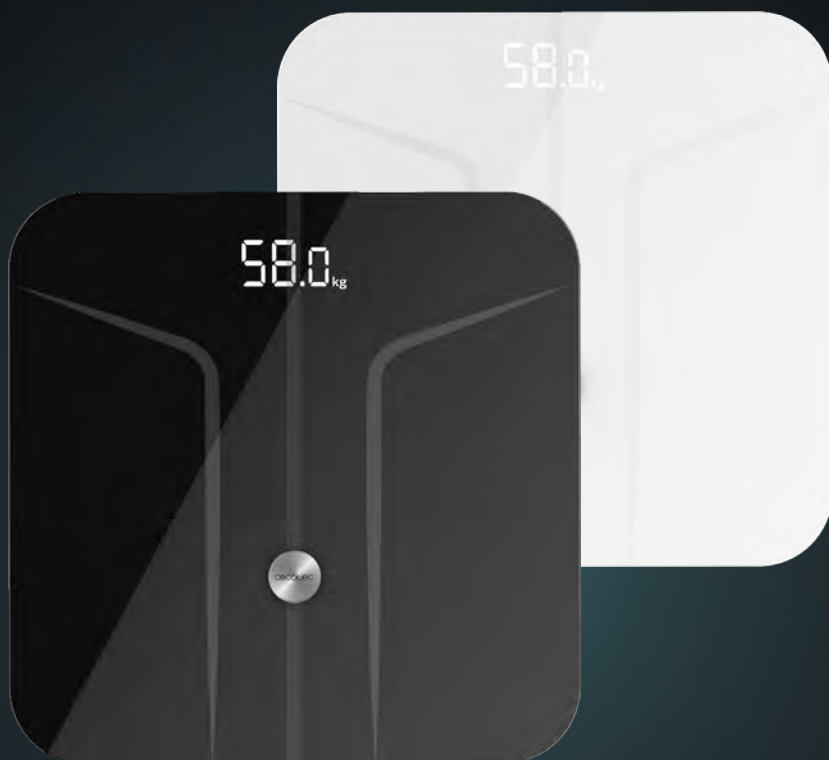

MOBILNÍ APLIKACE

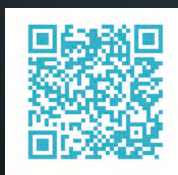

Návod k použití

OBSAH

1. Díly a součásti 26
2. Před použitím 26
3. Použití 26
4. Mobilní aplikace 27
5. Varovná upozornění 27
6. Čištění a údržba 28
7. Technické specifikace 28
8. Likvidace vysloužilých elektrických spotřebičů 29
9. Technická podpora a záruka 29

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití nebo pro další uživatele. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití a není vhodné pro komerční účely.

Pokud na zařízení nedohlížíte, uchovávejte jej i jeho obal mimo dosah dětí a zvířat.

Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje viditelné známky poškození. Pokud

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej kvůli zajištění bezpečnosti vyměnit autorizovaný servis technické podpory Cecotec. Udržujte zařízení mimo dosah elektromagnetických polí, jako jsou mobilní telefony, dálkové ovladače apod. Mohlo by dojít ke snížení přesnosti měření.

Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Zařízení nepoužívejte venku.

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vlhkosti, mokru ani přímému slunečnímu záření.

Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od vody a dalších kapalin.

Velké výkyvy teplot mohou způsobit kondenzaci. V takovém případě nechte zařízení před použitím ohřát na pokojovou teplotu.

Zařízení neupustíte a neskákejte na jeho měřicí plochu.

Nestoupejte na váhu s mokkými chodidly a ujistěte se, že měřicí plocha i podklad pod vahou jsou suché.

Nestoupejte na okraj váhy.

K čištění zařízení nepoužívejte žíravé ani abrazivní prostředky – mohly by poškodit povrch.

Tato váha je určena k měření tělesné hmotnosti, analýze podílu vody, tělesného tuku, svalové a kostní hmoty, stanovení tělesného věku, viscerálního tuku, metabolismu a fyzické kondice a k výpočtu indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Funkce BMI je vhodná pouze pro výpočet ideální hmotnosti u dospělých osob ve věku 18 let a více.

Vypočtené hodnoty slouží pouze jako orientační údaje.

Nepoužívejte je jako základ pro jakoukoli léčbu ani dietu; v případě pochybností se obraťte na odborníka.

Funkce analýzy těla není vhodná pro:

Osoby mladší 10 let nebo starší 70 let.

Osoby s kardiostimulátorem nebo jiným zdravotnickým implantátem s elektronickými součástmi.

Osoby s horečkou, otoky nebo příznaky osteoporózy.
Osoby podstupující dialyzační léčbu.
Osoby užívající kardiovaskulární léky.
Těhotné ženy.
Přístroj je určen pro maximální tělesnou hmotnost 180 kg.

Pokyny k bateriím.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat – při spolknutí mohou být smrtelně nebezpečné. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud baterie vytekla, zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s pokožkou, očima nebo sliznicemi.

Při zasažení kyselinou postižená místa okamžitě důkladně opláchněte velkým množstvím čisté vody a co nejdříve kontaktujte lékaře.

Před vložením baterií zkontrolujte, že jsou kontakty v přístroji čisté; pokud nejsou, vyčistěte je.

Používejte pouze typ baterií uvedený v technických specifikacích.

Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nekombinujte různé typy baterií ani baterie s odlišnou kapacitou.

Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

Vyměňte baterie z přístroje, jakmile se vybijí, nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.

Baterie se nesmí nabíjet ani znovu aktivovat, rozebírat, vyhazovat do ohně, ponořovat do kapalin ani zkratovat. Toto zařízení vyžaduje 4× baterie 1,5 V typu AAA.

Upozornění: Pokud se na displeji zobrazí „Lo“, je třeba vyměnit baterie.

Výměna baterií:

Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně váhy.

Vyměňte použité baterie.

Vložte 4× 1,5V baterie typu AAA. Dbejte na správnou polaritu.

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 1.

1. Displej

2. Kontaktní plocha pro pravou nohu

3. Kontaktní plocha pro levou nohu

4. Vysoce přesný senzor

5. Kryt baterie

6. Měřicí páska na tělo

2. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyjměte výrobek z krabice. Pečlivě zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud ano, neprodleně kontaktujte technickou podporu Cecotec.

Chcete-li zařízení aktivovat, vytáhněte ochranný proužek z prostoru pro baterii na spodní straně přístroje. Proužek je vložen kvůli bezpečnější přepravě.

Další informace

Vážíte se bez oblečení a naboso.

Doporučuje se vážit se vždy ve stejnou dobu a za stejných podmínek.

Naměřené hodnoty mohou být zkreslené, pokud se vážíte hned po sportu nebo pokud jste během dne málo jedli či pili.

Měření tělesného tuku, obsahu vody a svalové i kostní hmoty je možné pouze naboso a se suchými chodidly.

Váha reaguje od minimální hmotnosti 5 kg a zaokrouhuje na celé 100 g.

Měřicí plocha musí být čistá, aby zařízení správně fungovalo.

3. POUŽITÍ

Běžný režim

Umístěte zařízení na pevný, suchý a rovný povrch (vyhněte se kobercům). Nerovná podlaha může způsobit nepřesné výsledky měření.

Pro aktivaci displeje na váhu lehce Źukněte chodidlem.

Počkejte, až se na displeji zobrazí „0.0“ (kg/lb/st).

Než na váhu stoupnete, zvolte jednotku: kg, lb nebo st. Viz část Nastavení jednotek měření.

Stoupněte si na váhu – zařízení začne počítat hmotnost.

Jakmile je hmotnost určena, číslo na displeji začne blikat. Nyní můžete získat

sestupte z váhy.

Zařízení se po několika sekundách automaticky vypne.

Funkce vážení miminka

Tato funkce je navržena tak, aby automaticky získala přesné výsledky při vážení malých hmotností.

Tato funkce umožňuje v aplikaci zobrazit, aktivovat a sledovat vývoj hmotnosti (viz mobilní aplikace).

*Tato možnost je vhodná také pro vážení domácích mazlíčků a zavazadel.

4. MOBILNÍ APLIKACE

Obr. 2.

Obr. 3.

Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Surface Precision, případně ji vyhledejte na Google Play nebo v App Store.

Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů, abyste váhu spárovali a mohli ji začít používat.

5. VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

Na displeji se mohou zobrazit následující varovná upozornění:

Displej	Význam
Lo	Baterie ve váze jsou téměř vybité. Vložte nové baterie (viz část „Výměna baterií“).
Err	Zatížení váhy přesahuje 180 kg – váha tuto hmotnost neudrží.
C	Během měření došlo k chybě. Sestupte z váhy a znovu se na ni postavte, aby se měření opakovalo.

Možné chyby

Chyba	Možný význam
Nereálné hodnoty tělesného tuku a obsahu vody.	Tělesný tuk obsahuje poměrně málo vody. To znamená, že u osob s vyšším podílem tělesného tuku může být obsah vody v těle nižší, než uvádějí orientační hodnoty. U vytrvalostních či výkonnostních sportovců mohou být naopak orientační hodnoty překročeny kvůli nižšímu podílu tuku a vysokému zastoupení svalové hmoty.
Nesprávné měření hmotnosti.	Váha je umístěná na nerovném povrchu (např. na koberci). Pokud podklad není rovný, mohou být naměřené hodnoty zkreslené.
	Nelze vypočítat hodnoty tělesného tuku ani obsahu vody v těle. Chodidla musí být správně umístěná na kontaktní ploše, bosá a suchá.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy přístroj neponořujte do vody ani jiných kapalin. Při čištění nesmí do přístroje vniknout žádná tekutina.

K čištění přístroje nepoužívejte žíravé ani abrazivní čisticí prostředky. Mohly by poškodit povrch.

Přístroj čistěte mírně navlhčeným měkkým hadříkem a v případě potřeby jemným čisticím prostředkem. Když přístroj nepoužíváte, uložte jej na suché a čisté místo, chráněné před přímým slunečním zářením a mimo dosah dětí.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

04151 SurfacePrecision 9700 Smart Healthy

04152 SurfacePrecision 9750 Smart Healthy

Maximální zatížení: 180 kg

Napájení: 4× baterie AAA 1,5 V DC

Měrné jednotky: kilogram (kg) / stone (st) / libra (lb)

Uživatelé: 8

Funkce: 10

Frekvenční pásmo Bluetooth: 2.402 GHz-2,480 GHz

8. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat do běžného netříděného komunálního odpadu.

Vysloužilé spotřebiče je nutné odevzdávat odděleně, aby se co nejlépe využily a recyklovaly materiály, které obsahují, a zároveň se omezil dopad na lidské zdraví i životní prostředí.

Přeškrtnutý symbol „popelnice na kolečkách“ na výrobku upozorňuje na povinnost odevzdat spotřebič k řádné likvidaci. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, je třeba je ze spotřebiče vyjmout a zlikvidovat vhodným způsobem. Informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií získáte u místních úřadů nebo u prodejce.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 2 let od data nákupu, pokud předložíte doklad o koupi, výrobek je v perfektním fyzickém stavu a byl používán správně, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na následující případy:


Výrobek byl používán k jiným účelům, než pro které je určen, byl nesprávně používán, mechanicky poškozen, vystaven vlhkosti, ponořen do kapaliny či korozivních látek, nebo došlo k jakékoli jiné závadě zaviněné zákazníkem.

Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opravován osobami, které nejsou autorizovány oficiálním technickým servisem Cecotec.

Závady vzniklé běžným opotřebením jednotlivých částí při používání.

Záruční servis se v souladu s platnou legislativou vztahuje na veškeré výrobní vady spotřebiče po dobu 2 let, s výjimkou spotřebních dílů. V případě nesprávného používání se záruka neuplatní.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s výrobkem nebo si nebudete něčím jisti, neváhejte kontaktovat technickou podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

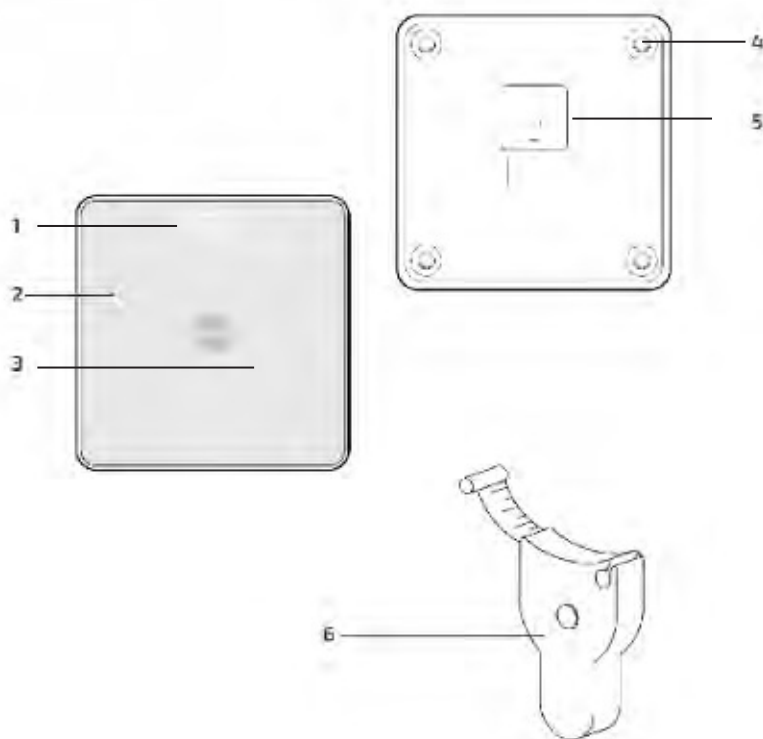

Obr./Img./Abb. 1



Obr./Img./Abb. 2



Obr./Img./Abb. 3

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
ul. Pinadeta č. p., 46930
Quart de Poblet, Valencie (Španělsko)
EA01200527